


Tetric EvoFlow[®]

Le composite fluide




Fluide lorsque vous le désirez,
il ne **coule pas**.

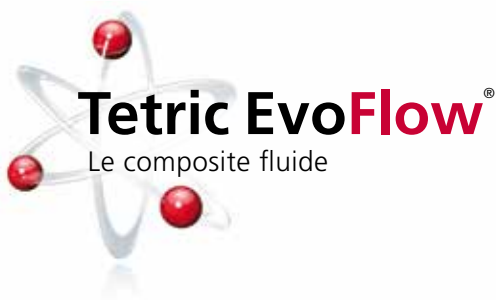

Un nouveau "look" pour un produit ayant fait ses preuves

Les composites fluides sont des matériaux indispensables à la dentisterie restauratrice moderne. Ils se révèlent très utiles dès l'instant où l'on souhaite obtenir une adaptation optimale. Tetric EvoFlow® excelle dans ce domaine. Ce composite fluide, le plus vendu en Europe et reconnu pour sa consistance idéale, est aujourd'hui présenté dans un nouveau conditionnement ergonomique. La qualité du matériau reste inchangée, comme en témoigne le Dr Eduardo Mahn, responsable de la recherche clinique à l'Université des Andes de Santiago (Chili) :

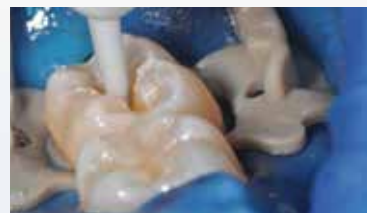

Dr Eduardo Mahn

” Lorsque je traite des cas complexes, je fais totalement confiance à la consistance de Tetric EvoFlow. Ce composite est facile à appliquer, et il me permet d'obtenir des résultats hautement esthétiques. ”

Images: Dr Eduardo Mahn, Santiago, Chili

Tetric EvoFlow fait partie de la gamme de produits «Tetric». Que vous ayez besoin d'un composite ferme ou fluide, cette gamme offre une solution pour chaque indication.

FERME		FLUIDE
Obturation par stratification	Obturation en un temps	Obturation par stratification
<p>Tetric EvoCeram®</p> <p>Le composite à appliquer couche par couche</p> <p>Il a fait ses preuves sur des millions de restaurations, et existe en 4 teintes Dentine, 14 teintes Email, et 4 teintes Bleach</p>	<p>Tetric EvoCeram® Bulk Fill</p> <p>Le composite en un temps</p> <p>Pratique et esthétique pour les obturations postérieures en un temps par couches jusqu'à 4 mm, il existe en 3 teintes</p>	<p>Tetric EvoFlow®</p> <p>Le composite fluide</p> <p>3 nouvelles teintes</p> <p>Fluide, éprouvé, il existe en 3 teintes Dentine, 8 teintes Email, et 3 teintes Bleach</p>



Tetric EvoFlow®

Le composite fluide

Les nouvelles caractéristiques

Tetric EvoFlow est disponible en deux présentations : en cavifils avec embouts extra-fins, ou en seringues. Grâce à son nouveau design ergonomique, la seringue est d'une excellente tenue en main.

Pour garantir une application précise, Tetric EvoFlow est fourni avec des canules métalliques de 0,9 mm de diamètre. Ces canules fines sont idéales pour la restauration des petites cavités et des zones difficiles d'accès. Elles se fixent facilement sur la seringue grâce au système de clips. Une fois les deux éléments assemblés, aucune infiltration bactérienne n'est possible.



Nouvelles teintes

La gamme de teinte s'étend, et inclut désormais trois nouvelles teintes : B1 Email, A2 Dentine et B2 Dentine. La teinte B1 est particulièrement adaptée pour les dents plus claires. Grâce à leur opacité naturelle, les teintes dentine peuvent être utilisées pour masquer de légères dyschromies postérieures.


Tetric EvoFlow peut idéalement être associé à d'autres composites tels que Tetric EvoCeram® et Tetric EvoCeram® Bulk Fill, et peut être utilisé comme fond de cavité sous des composites de viscosité standard.





Une radio-opacité exceptionnelle


Il est essentiel qu'un matériau de restauration ait une radio-opacité adaptée afin de diagnostiquer précisément les reprises de caries. Tetric EvoFlow présente une radio-opacité de 360% Al. Il est donc plus facile, pour le praticien, de différencier les tissus durs du matériau de restauration.

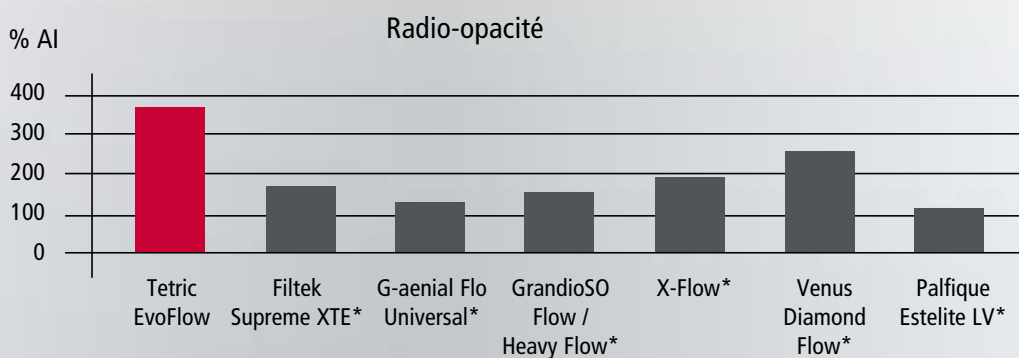

R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012 (mesuré selon ISO 4049)

*Ces marques ne sont pas des marques déposées par Ivoclar Vivadent AG.



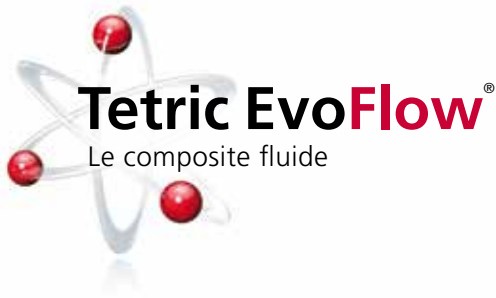

Fluide mais ne coule pas

Tetric EvoFlow se caractérise par une adaptation optimale et une stabilité parfaite. Le matériau diffuse là où il faut, puis s'arrête. Ce comportement s'explique par la présence, au sein du matériau, d'un mécanisme de régulation de la viscosité.

Le risque de manque (bulle d'air) est exclu, même dans les zones difficiles d'accès.



Situation de départ : Tetric EvoFlow (à gauche), SDR Flow* (au milieu) et Palfique Estelite LV* (à droite) sont appliqués sur une vitre posée à la verticale.



Résultat après cinq minutes

&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012.

*Ces marques ne sont pas des marques déposées par Ivoclar Vivadent AG.

Une consistance idéale adaptée à toutes les indications



Première couche/fond de cavité sous des composites de viscosité standard dans des cavités des classe I à V, ex. Tetric EvoCeram ou Tetric EvoCeram Bulk Fill



Scellement étendu de puits et sillons



Tous les types de micro-cavités (Classe III et V)

Avantages

- ▶ Fluide lorsque vous le désirez, il ne coule pas
- ▶ Consistance idéale pour toutes les situations nécessitant un composite
- ▶ Une gamme de teinte complétée de trois nouvelles teintes.
- ▶ Le composite fluide le plus vendu en Europe

La gamme Tetric en un coup d'œil

Tetric EvoFlow

Seringues

Assortiment 8 x 2 g

1 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, A3.5 Dentin, T
1 x teintier Tetric EvoFlow
40 x canules Ø 0.9 mm

Refill, 1 x 2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B3
T, A3.5 Dentin,
Bleach XL, Bleach L, Bleach M
5 x canules Ø 0.9 mm

Nouveau : B1, A2 Dentin, B2 Dentin, canules Ø 0.9 mm

Teintier comportant les 14 teintes

Cavifils

Assortiment 40 x 0.2 g

5 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, A3.5 Dentin, T
1 x teintier Tetric EvoFlow

Refill, 20 x 0.2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B3
T, A3.5 Dentin,
Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Nouveau: B1, A2 Dentin, B2 Dentin

Tetric EvoCeram

Seringues

Assortiment 8 x 3 g

1 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3
1 x teintier Tetric EvoCeram

Refill, 3 x 3 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2,
D3, A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin,
T, Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

Refill, 1 x 3 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2,
D3, A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin,
T, Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

Teintier comportant les 22 teintes

Cavifils

Assortiment 40 x 0.2 g

5 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3
1 x teintier Tetric EvoCeram

Refill, 20 x 0.2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3,
A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin, T,
Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Seringues

Refill, 1 x 3 g ou 3 x 3 g

IVA, IVB, IVW

Teintier comportant les 3 teintes

Cavifils

Refill, 20 x 0.2 g

IVA, IVB, IVW



Ce produit fait partie de notre gamme de compétence en « Composites ». Tous les produits de cette gamme sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
74410 Saint-Jorioz Cedex
Tel: 0450 886 400
Fax: 0450 689 152
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com


ivoclar
vivadent®
passion vision innovation