

# Excite® F

ADHÉSIF PHOTOPOLYMÉRISABLE

UTILISABLES APRÈS MORDANÇAGE ET RINÇAGE



# Excite® F DSC

ADHÉSIF DUAL



**L'adhésion : avec ou sans lampe ?**

Quelle que soit la situation clinique,  
vous avez la solution !

# ExcITE® F

## L'adhésion en toute simplicité

### PRATIQUE & EFFICACE

ExcITE® F est un adhésif amélo-dentinaire monocomposant photopolymérisable contenant du fluor. Un mordantage et un rinçage préalables sont nécessaires avant son application.

ExcITE® F est indiqué pour les restaurations directes (composites, compomères) et indirectes (tout-céramique, composites) à condition de photopolymériser le composite de collage.

ExcITE F est disponible en trois conditionnements :

- VivaPen
- Flaçon
- Unidose Soft Touch™.



Source: Dr A Peschke, Ivoclar Vivadent AG, Schaan


#### Les avantages du VivaPen

- Application directe facile et rapide
- Dosage exact et économique
- Accès facile à toutes les cavités, grâce à des canules fines, rigides
- Indicateur de niveau intégré
- Environ 120 applications pour un VivaPen 2 ml

#### Compétence en Composites



OptraDam® Plus

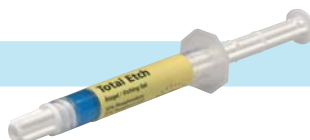

Total Etch



ExcITE® F




Application précise  
et brossage doux  
mais énergique

Dosage exact et  
économique



## VALEURS D'ADHÉSION ÉLEVÉES

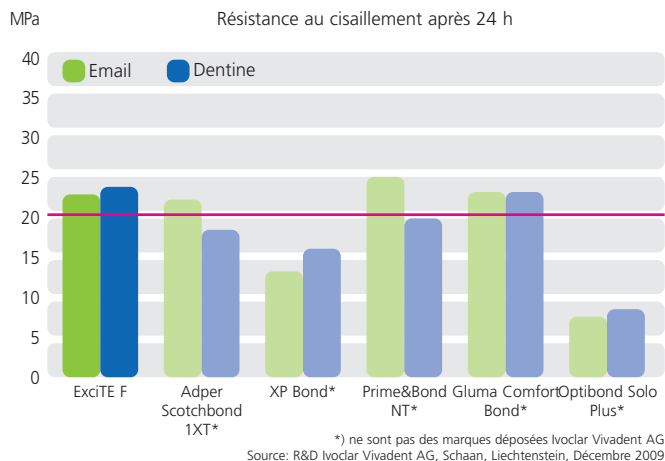

### Valeurs d'adhésion élevées sur émail et dentine

Un seule couche d'ExcITE F suffit à obtenir une adhésion durable aux tissus dentaires.

### Formule sans acétone

ExcITE F contient un solvant, l'éthanol, qui permet de conserver l'adhésif pendant une longue période, sans affecter la qualité et les valeurs d'adhésion.

### Sensibilités post-opératoires minimales

La libération de fluor qui fait suite à l'application d'ExcITE F aide à prévenir les sensibilités post-opératoires.

ExcITE F contient des charges extrêmement fines (nanocharges) qui garantissent l'imprégnation uniforme de la cavité avec une seule couche d'adhésif. **Un film brillant, très visible, se forme après l'application, permettant de s'assurer que la dentine et l'émail ont été recouverts de manière homogène.**

### Larges indications

Compte tenu du fait qu'il a été préalablement photopolymérisé, ExcITE F peut aussi être utilisé pour l'assemblage de restaurations indirectes. La faible épaisseur de film laisse une large place au matériau de collage.



Contrôle de la quantité disponible



Tetric EvoCeram®



Bluephase®

OpraPol®



Tetric EvoFlow®



# ExcITE<sup>®</sup> F DSC

## Monocomposant, à prise duale

### TECHNOLOGIE INNOVANTE DE L'APPLICATEUR

**ExcITE F DSC – Dual Cure Single Component** – est un adhésif amélo-dentinaire monocomposant à prise duale, contenant du fluor. Il nécessite un mordantage et un rinçage préalables à son application. ExcITE F est indiqué dans les cas cliniques où la lumière de la lampe à photopolymériser ne peut atteindre le fond de la cavité, ou si le composite est dual ou chémozépolymérisable.

ExcITE F DSC est livré avec un applicateur spécialement breveté, enduit d'initiateurs nécessaires au processus de prise duale. Lorsque l'on plonge l'applicateur dans la solution adhésive, les initiateurs se mélangent à l'adhésif, lui conférant ainsi ses propriétés duales.

ExcITE F DSC, tout comme ExcITE F, atteint d'excellentes valeurs d'adhésion, et, grâce à sa composition sans acétone, fait preuve d'une très bonne stabilité au stockage.

### L'applicateur enduit de cristaux d'initiateurs, vu au microscope électronique



### Application clinique



1. Mordantage à l'acide phosphorique de la dentine radinaire et de la structure dentaire intacte.



2. Rinçage de l'emplacement du tenon



3. Séchage à l'aide de pointes de papier

## APPLICATION FACILE

L'application d'ExcITE F DSC est simple et rapide.

La présentation en unidose permet d'utiliser le matériau de manière totalement hygiénique.

Il n'est pas nécessaire de pré-polymériser ExcITE F DSC, comme cela peut être le cas pour beaucoup d'autres systèmes adhésifs. L'adaptation de la restauration n'est ainsi pas compromise.


### Indications

- Assemblage de pièces prothétiques en combinaison avec des composites de collage (ex. Variolink® II)
- Collage des tenons et reconstitution de faux-moignon en combinaison avec des composites de reconstitution coronoradiculaire (ex. FRC Postec® Plus et MultiCore®)
- En combinaison avec des composites de restauration photopolymérisables (ex. Tetric EvoCeram®)

### Deux formes et tailles d'applicateurs :



Regular (bleu clair) pour les restaurations directes et indirectes, et Small/Endo (bleu foncé) pour les reconstitutions coronoradiculaires et les micro-cavités.

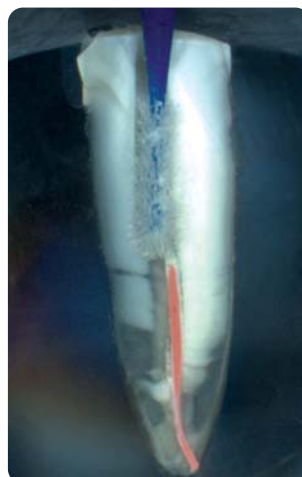

Application facile d'ExcITE F DSC dans le canal radiculaire à l'aide d'un applicateur Endo.



4. Application d'ExcITE F DSC pendant 10 s avec un applicateur Endo et séchage



5. Collage du tenon et du faux-moignon avec MultiCore Flow



6. Reconstitution coronoradiculaire terminée

# ExcITE® F & ExcITE® F DSC

## Une équipe imbattable

### Les avantages d'ExcITE F

- Valeurs d'adhésion élevées sur émail et dentine
- Qualité constante due à une composition sans acétone
- Peu de sensibilités post-opératoires grâce au fluor
- Disponible en VivaPen, flacon et unidose Soft Touch

### Les avantages d'ExcITE F DSC

- Utilisation facile et en une étape grâce aux applicateurs imprégnés d'initiateurs
- Issu de la technologie ExcITE F : des propriétés physiques éprouvées
- Aucune pré-polymérisation requise
- Présentation hygiénique en unidose

### Présentations\*

#### ExcITE F

##### VivaPen

<b>Intro Pack</b>		627177
2 ml	ExcITE F	
100	Canules VivaPen	
20	Housses de protection VivaPen	
2 g	Total Etch	
10	Canules Total Etch	

<b>Refill/1</b>		613724
2 ml	ExcITE F	
100	Canules VivaPen	
20	Housses de protection VivaPen	

##### Accessoires VivaPen

Refill Canules VivaPen/100	627178
Refill Housses de protection VivaPen/300	627492

##### Unidose Soft Touch

<b>Refill</b>		630377
50 x 0.1 g	ExcITE F	

##### Flacon

<b>Refill</b>		630375
5 g	ExcITE F	

<b>Refill</b>		630376
2 x 5 g	ExcITE F	

##### Accessoires flacon

Refill Regular applicators/50	631699
Refill Small/Endo applicators/25	562168

#### ExcITE F DSC

##### Unidose Soft Touch

<b>Refill Regular</b>		630378
50 x 0.1 g	ExcITE F DSC	

<b>Refill Small/Endo</b>		630380
50 x 0.1 g	ExcITE F DSC	

\* La disponibilité des différentes présentations peut varier d'un pays à l'autre.

Pour plus d'information, veuillez contacter Ivoclar Vivadent ou consulter notre site Internet.



ExcITE F fait partie de nos gammes de compétence "Composites" et "Tout céramique". Les produits de ces gammes sont coordonnés les uns aux autres.

Dispositifs médicaux Classe IIA/CE0123 TÜV SÜD.  
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation.  
Produits non remboursés par les organismes de santé.

Ces matériaux ont été développés exclusivement pour un usage dentaire. Ils doivent être mis en oeuvre en respectant scrupuleusement le mode d'emploi. LES descriptions et données fournies ne sont pas contractuelles et n'engagent pas la responsabilité du fabricant.  
Imprimé en France  
Février 2010

Ivoclar Vivadent SAS  
BP 118  
74410 Saint-Jorioz  
France  
Tél. 04 50 88 64 00  
Fax 04 50 68 91 52  
[www.ivoclarvivadent.fr](http://www.ivoclarvivadent.fr)

  
passion vision innovation