

Programat® P310

Le four convivial

Cuisson économique
et performante.
Résultats de
haute-qualité.



Le Programat® le plus économique de tous les temps.

Éprouvé

Les fours de cuisson et de pressée Ivoclar Vivadent sont une réussite de longue date. L'entreprise produit des fours dentaires de qualité depuis 1976. Ils ont, à maintes reprises, prouvé leur efficacité à travers le monde.

Innovant et économique

Le Programat® P310, développé sur la base du Programat® P300, présente de nombreuses innovations pratiques. Ce qui le rend encore plus économique.

ET PLUS ENCORE



- Large plateau de refroidissement
- Support de pinces de cuisson intégré
- Mode de fonctionnement pour les grands laboratoires
- Étalonnage manuel de la température au test d'argent
- Divers programmes de maintenance
- 300 programmes de cuisson personnalisés
- Assistant Paramètre de Vide (VPW – Vacuum Parameter Wizard)



Autres caractéristiques

Technologie de moufle QTK2 (tube de quartz Kanthal) avec plateau diffuseur de chaleur en SiC

La nouvelle technologie de moufle QTK2, associée au plateau diffuseur de chaleur SiC, garantit une distribution homogène de la chaleur et des résultats de cuisson optimaux.




Protection contre les chocs thermiques (TSP "Thermo-Shock Protection")

La fonction TSP évite les chocs thermiques dans la céramique si la température est trop élevée au moment de la fermeture du four.



Technologie de vide à double valve

Cette fonction réduit le niveau sonore de la pompe à vide pendant qu'elle évacue l'humidité du tuyau et de la chambre de cuisson.

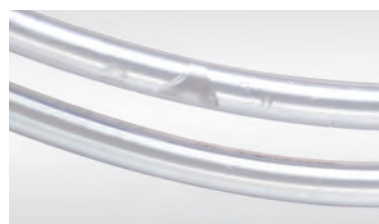

Ports LAN et USB

Le four peut être connecté à d'autres appareils tels qu'une imprimante, une clé USB ou un disque dur externe grâce aux interfaces LAN et USB. Les mises à jour du logiciel peuvent être téléchargées à tout moment par clé USB.



Système de protection contre les coupures d'électricité

Cette fonction pallie toute coupure d'alimentation jusqu'à 10 secondes sans interrompre le programme.




Tête de four amovible

Transport et maintenance sont facilités grâce à la tête de four amovible.



Diagnostics à distance via e-mail

D'un simple clic, il est possible de générer un fichier de données de diagnostic, puis de l'envoyer par mail à l'un des centres de services qui le traitera immédiatement.

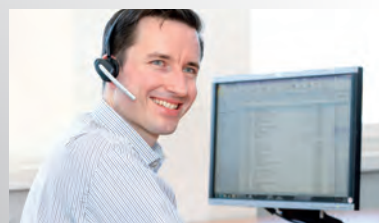

La nouvelle référence. Et sa simplicité de fonctionnement.



Facilité d'utilisation

Le Programat P310 se distingue par son exceptionnelle facilité d'utilisation. Le programme se choisit rapidement et en toute simplicité sur l'écran tactile haute-résolution ou sur le clavier numérique. Le menu est clairement structuré et illustré d'icônes modernes sur lesquelles il suffit de cliquer pour sélectionner les programmes et les paramètres.

Écran OSD

Le code couleur de l'écran OSD ("Optical Status Display"), visible de loin, vous informe de l'état d'avancement du programme.



Tous les programmes de cuisson Ivoclar Vivadent sont préétablis et classés par groupes de matériaux.

Programat®

L'HISTOIRE D'UN SUCCÈS

Économique
Efficace
Tourné vers l'avenir



Touche de mise en veille pour réduire la consommation d'énergie

Pour une utilisation responsable des énergies, Ivoclar Vivadent s'est fixé comme objectif de développer des équipements efficaces et économiques. Le Programat P310 a donc été doté d'une fonction d'économie d'énergie. Cette technologie réduit la consommation d'énergie de 40% en mode veille. La réduction des dépenses énergétiques contribue à préserver l'environnement. Retrouvez le logo "Power Saving Technology" sur la face arrière de votre four.

Économiser l'énergie, c'est facile

Appuyez simplement sur la touche Power Saving: Si le four n'est pas en cours d'utilisation, appuyez brièvement sur la touche Power Saving pour activer le mode économie d'énergie.

Données techniques

Alimentation	110 – 120 V, 50 – 60 Hz 200 – 240 V, 50 – 60 Hz variations de tension admises ± 10 %
Consommation d'énergie max.	12 A à 110 – 120 V 8.5 à 200 – 240 V
Données pompe à vide	Consommation d'énergie max. : 250 W Vide final : < 50 mbar N'utiliser que des pompes testées
Dimensions du four fermé	Profondeur : 455 mm Largeur : 315 mm / 390 mm (avec le plateau de refroidissement) Hauteur : 315 mm
Dimensions de la chambre de cuisson	Diamètre : 90 mm Hauteur : 80 mm
Température de cuisson max.	1200 °C
Poids	15,6 kg
Information sécurité	Le four a été construit conformément aux normes suivantes : – IEC 61010 – UL et CAN/CSA
Protection antiparasite et compatibilité électromagnétique	Contrôle CEM

Présentations

Programat P310

Cordon d'alimentation
Tuyau de vide
Plateau de refroidissement Programat
Plateau de cuisson SiC Programat
Plateau de cuisson kit 2 Programat
Set de contrôle de la température
Fusibles de rechange
Câble USB
Clé USB Programat
Chiffon pour le nettoyage de l'écran Programat
Support de pinces de cuisson

Accessoires recommandés

(non inclus dans la livraison)

Pompe à vide VP3 easy ou VP4
Pincés



VP3 easy



VP 4





Prothèse fixée


Programat® fait partie de la gamme de produits pour prothèses fixées. Les produits de cette catégorie couvrent l'ensemble de la procédure de réalisation des prothèses fixées, des provisoires à l'entretien des prothèses. Ces produits sont coordonnés les uns aux autres de manière optimale et permettent une mise en œuvre et une application réussies.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

Alliages

Un choix unique d'alliages

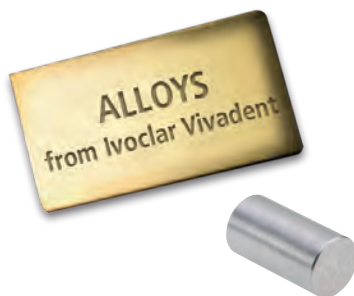

Performance, qualité, fiabilité

- Large gamme d'alliages adaptés aux exigences de la dentisterie moderne
- Parfaitement coordonné aux matériaux de stratification en céramique et composite
- Plus de 100 ans d'expérience dans le domaine des alliages dentaires

IPS InLine® System

Céramo-métallique polyvalente



La réussite d'un système

- Utilisation facile quelle que soit l'application
- Rapidité d'obtention du résultat souhaité
- Effets esthétiques

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits de la gamme "Prothèse amovible" ? Contactez simplement votre interlocuteur Ivoclar Vivadent ou visitez notre site Internet www.ivoclarvivadent.com.

Les produits Telio®, Alliages, IPS InLine® System et Multilink® font partie du Dispositif médical Classe IIA/CE0123 TÜV SÜD. Le produit Cervitec® fait partie du Dispositif médical Classe III/CE0123 TÜV SÜD. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation. Produits non remboursés par les organismes de santé.

Ivoclar Vivadent SAS
 B.P. 118
 F-74410 Saint-Jorioz
 France
 Tel. +33 450 88 64 00
 Fax +33 450 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
 fr/2013-09-12

ivoclar
vivadent
 passion vision innovation