

NOUVEAU

IPS Ivocolor

Maquillants et glasures universels



One for all



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Un seul maquillant pour toutes les céramiques IPS*

IPS Style[®] caractériser
flexible céramique
IPS Empress[®] IPS Empress[®] IPS d.SIGN[®]
IPS InLine[®]
esthetic performance
personnaliser maquillants
IPS InLine[®] performance
IPS e.max[®] universel
maquillants IPS Classic[®] polyvalent
Zenostar[®]



* à l'exception des restaurations non cristallisées IPS e.max CAD et CAD-on

parfaire
flexible
max[®]
caractériser
Essence
Glaze
color universel
esthétique
IPS d.SIGN[®]
IPS Style[®]

IPS Ivocolor est une gamme universelle de maquillants et de glasures indiqués pour les céramiques pressées, usinées et de stratification Ivoclar Vivadent et pour les zircons Zenostar[®] Wieland Dental. Désormais, les prothésistes dentaires n'utiliseront qu'un seul assortiment pour personnaliser et glacer leurs restaurations, ceci afin de travailler plus efficacement, d'optimiser la rentabilité du laboratoire et de réaliser des restaurations d'une qualité élevée et constante.

Quels sont les avantages d'IPS Ivocolor pour les prothésistes dentaires ?

- Liberté de personnalisation des restaurations grâce aux assortiments de couleurs
- Manipulation facile grâce à une nouvelle formulation de pâte
- Haute brillance obtenue dès 710°C
- Brillance pure – aucune coloration grise ou blanche
- Adapté aux céramiques IPS haute et basse fusion



IPS Ivocolor Shade

Adaptation de la teinte :
rapide, facile et raffinée



Les pâtes IPS Ivocolor Shade sont conçues pour correspondre au teintier A-D :

- 9 matériaux IPS Ivocolor Shade Dentin idéalement coordonnés offrant une grande efficacité dans la personnalisation des restaurations
- 3 matériaux IPS Ivocolor Shade Incisal apportant une apparence naturelle aux zones incisales
- Facilité d'utilisation et application homogène de la teinte grâce à la nouvelle formulation du gel
- Particulièrement adapté pour la personnalisation des restaurations monolithiques
- Plusieurs degrés de fluorescence, en fonction de la teinte

IPS Ivocolor Shade Dentin



Shade Incisal



Application de nuances de teinte à l'aide des matériaux Shade Dentin



Personnalisation de la zone incisale à l'aide des matériaux Shade Incisal




IPS Ivocolor Essence

Effets, nuances et accentuations :
reproduction fidèle de la nature



IPS Ivocolor Essence permet d'élargir les possibilités de caractérisation individuelle des restaurations :

- Fines poudres de verre pour un maquillage homogène
- Un choix de 23 poudres Essence permettant la personnalisation de chaque restauration
- Plusieurs options de mise en œuvre
- Obtention possible d'une consistance pâteuse avec le liquide Essence Fluid
- Plusieurs degrés de fluorescence possibles, en fonction de la teinte à réaliser

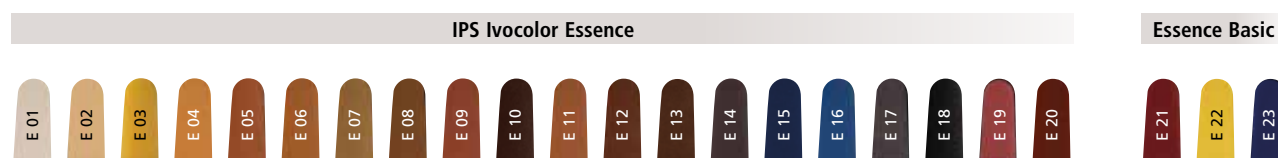

Caractérisation de surface personnalisée



Effets de teinte en technique de stratification



IPS Ivocolor Glaze

La nouvelle référence en matière de glasures



IPS Ivocolor Glaze pour des résultats de cuisson fiables avec des nuances exactes :

- Brillant élevé obtenu en une seule cuisson
- Brillant constant, quel que soit le substrat céramique (ex. cut-back)
- Pas de coloration grise ou blanche
- Glaçages avec ou sans fluorescence
- Disponible sous forme de poudre ou de pâte

Glasure adaptée aux céramiques haute et basse fusion



Haute brillance obtenue dès 710°C



IPS Ivocolor et fours à céramique Programat®

Pour garantir que le succès du processus de cuisson ne soit pas le fruit du hasard, Ivoclar Vivadent a conçu la série des fours à céramique Programat®.

- Facilité de sélection du programme : les programmes de cuisson IPS Ivocolor sont enregistrés dans le four et sont accessibles rapidement
- Une seule température pour les cuissons de maquillage et de glaçage en technique de maquillage et de cut-back
- Résultats de cuisson uniformes grâce à un contrôle précis et une distribution homogène de la température

Le four à céramique Ivoclar Vivadent Programat® P710 est doté de la technologie brevetée DSA Digital Shade Assistant pour la détermination numérique de la teinte. Le système DSA compare les valeurs sélectionnées sur le teintier avec la teinte de la dent du patient et affiche la correspondance la plus proche.



1. Présélectionnez les trois teintes de teintier correspondant le mieux à la dent.



2. Prenez une photographie des dents et du teintier et transférez les données vers le four à l'aide d'une carte SD, d'une clé USB ou par WLAN.

3. Choisissez le mode Shade Analysis, importez les photos et démarrez la détermination numérique de teinte. Il est également possible d'afficher les valeurs de luminosité et de saturation (valeurs L, A et B).



Présentation

IPS Ivocolor Starter Kit

5x IPS Ivocolor Shade
5x IPS Ivocolor Essence
1x IPS Ivocolor Glaze Powder
1x IPS Ivocolor Glaze Paste
1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround
1x IPS Ivocolor Essence Fluid
1x IPS Ivocolor Teintier – Shade
1x IPS Ivocolor Teintier – Essence

IPS Ivocolor Shade Kit

9x IPS Ivocolor Shade Dentin
3x IPS Ivocolor Shade Incisal
1x IPS Ivocolor Glaze Paste
1x IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO
1x IPS Mixing Liquid allround
1x IPS Mixing Liquid longlife
1x IPS Ivocolor Teintier – Shade

IPS Ivocolor Essence Kit

23x IPS Ivocolor Essence
1x IPS Ivocolor Glaze Powder
1x IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO
1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround
1x IPS Ivocolor Essence Fluid
1x IPS Ivocolor Teintier – Essence

Recharges unitaires

IPS Ivocolor Shade

Pâtes prêtes à l'emploi
en 9 teintes Dentin et 3 teintes Incisal
Présentation : Pot de 3 grammes

IPS Ivocolor Essence

Maquillants en poudre
en 23 teintes
Présentation : Pot de 1,8 grammes

IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO

Glasure en pâte
avec ou sans effet fluorescent
Présentation : pots de 3 et 9 grammes

IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO

Glasure en poudre
avec ou sans effet fluorescent
Présentation : pots de 1,8 et 5 grammes





Prothèse fixée

IPS Ivocolor fait partie des produits pour prothèses conjointes. Les produits de cette catégorie couvrent l'ensemble de la procédure de réalisation de restaurations fixées, des provisoires à l'entretien des prothèses. Ces produits sont coordonnés les uns aux autres de manière optimale et permettent une mise en œuvre et une application réussies.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

IPS e.max® System

all-ceramic – all you need



La solution complète pour toutes les indications

- Matériaux hautement esthétiques et hautement résistants pour la technique de pressée et la CFAO
- Céramiques au disilicate de lithium (LS₂) et zircone (ZrO₂) pour les restaurations dentaires, des facettes pelliculaires aux bridges longue portée
- Flexibilité de solidarisation : collage, collage auto-adhésif, scellement

Programat®

Fours à céramique et de pressée adaptés aux plus hautes exigences



Dotés d'une technologie éprouvée et d'innovations de pointe Programat®

- Résultats de cuisson et de pressée exceptionnels
- Idéalement coordonnés aux matériaux céramiques Ivoclar Vivadent
- Faciles à utiliser

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits de la gamme „Prothèse Fixée” ? Contactez simplement votre interlocuteur Ivoclar Vivadent ou visitez notre site internet www.ivoclarvivadent.fr.

Dispositif médical Classe IIA/CE0123.

Nous vous invitons à lire attentivement la notice.

Produits non remboursés par les organismes de santé.

Ivoclar Vivadent AG
 Bendererstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tél. +423 235 35 35
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent SAS
 B.P. 118
 F-74410 Saint-Jorioz
 France
 Tél. +33 450 88 64 00
 Fax +33 450 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

fr/2015-11-02

ivoclar
vivadent
 passion vision innovation