

Une **solution** pour toutes les **indications**

Tetric Evo-Line



Tetric EvoCeram®



Tetric EvoFlow®



Tetric EvoCeram® Bulk Fill



Tetric EvoFlow® Bulk Fill


ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Une solution pour toutes les indications

Tetric EvoCeram®

Composite universel



Performance éprouvée
esthétique exceptionnelle

IDÉAL POUR

tous types de restaurations directes en zone antérieure ou postérieure, nécessitant une esthétique avancée.

&

Tetric EvoFlow®

Composite fluide



Fluide lorsque vous le désirez,
stable si nécessaire

IDÉAL POUR

restauration directe de défauts dentaires à géométrie complexe (fond de cavité irrégulier, préparation de classe V, microcavités, lésions cervicales,...).

Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Composite bulk-fill modelable



Composite postérieur
rapide et performant

IDÉAL POUR

restauration directe des dents postérieures en un seul temps (jusqu'à 4 mm d'épaisseur).

&

Tetric EvoFlow® Bulk Fill

Composite bulk-fill fluide



Substitution dentinaire postérieure
efficace et esthétique

IDÉAL POUR

substitution dentinaire rapide (jusqu'à 4 mm d'épaisseur) pour les dents postérieures en association avec Tetric EvoCeram Bulk Fill ou Tetric EvoCeram.

Cas clinique réalisé par le Prof. Dr. Jurgen MANHART (Munich, Allemagne)



Situation initiale. Restauration au composite défectueuse sur dent 12.



Retrait du composite et préparation minimalement invasive.



Stratification et modelage de Tetric EvoCeram.



Résultat post-opératoire après finitions (2005).



Contrôle (2014). Maintien de la forme et du rendu esthétique.

Cas clinique réalisé par le Dr Arnd PESCHKE (Schaan, Liechtenstein)



Situation initiale : restauration en composite défectueuse sur dent 16.



Préparation de la cavité. (profondeur maximale de 4 mm).



Obturation en un seul incrément avec Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA.




Modelage et finition du composite.



Contrôle à 1 semaine. Parfaite intégration esthétique.

Quel type de cavité souhaitez-vous traiter ?

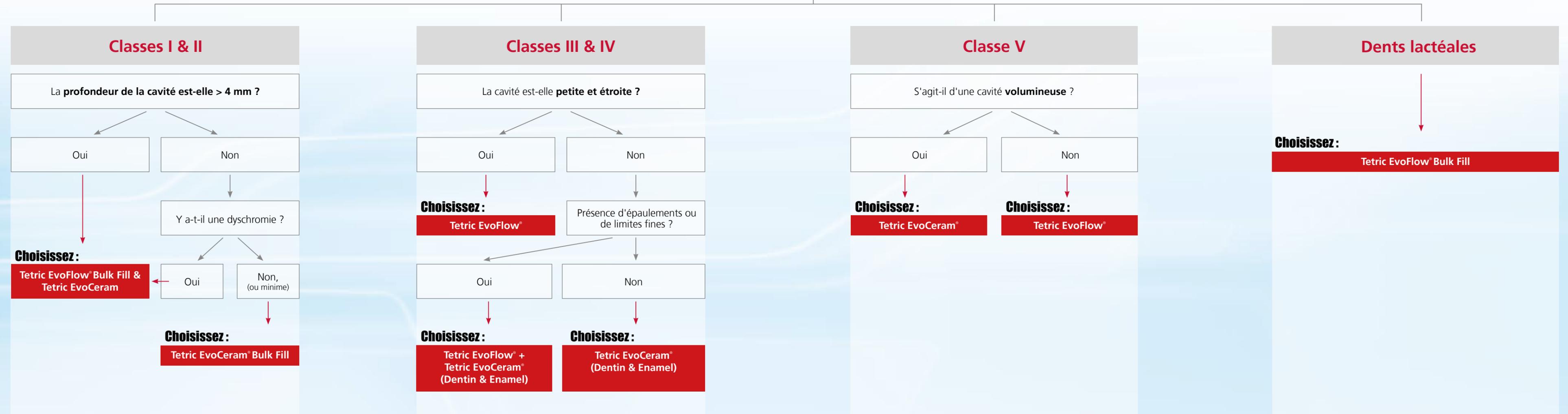

Une solution pour toutes les indications

Zone postérieure : Classes I & II

Si vous voulez...

l'efficacité en une étape...

efficacité, esthétique et choix de la teinte...

efficacité et esthétique dans les cavités très profondes (> 6 mm)...

efficacité et masquage de la dentine dyschromiée...

stratification conventionnelle...

stratification conventionnelle plus esthétique...

Nos recommandations :

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Tetric EvoFlow Bulk Fill¹ et Tetric EvoCeram²

Tetric EvoFlow Bulk Fill¹ et Tetric EvoCeram Bulk Fill¹

Tetric EvoFlow (Dentin³) et Tetric EvoCeram Bulk Fill

Tetric EvoCeram²

Tetric EvoCeram² (teintes Dentin & Enamel)

¹ dans la teinte appropriée (*A pour les teintes A, C & D ; *B pour les teintes B ; *W pour les teintes Bleach); ² disponible en 22 teintes et 3 translucidités ; ³ comme fond de cavité

Zone antérieure : Classes III & IV

Si vous voulez...

stratification conventionnelle...

bonne adaptation du matériau au biseau...

fermeture d'un diastème...

Nos recommandations :

Tetric EvoCeram¹ (teintes Dentin & Enamel)

Tetric EvoFlow² (comme liner) et Tetric EvoCeram (Enamel)

Tetric EvoFlow

¹ disponible en 22 teintes (18 teintes Enamel & 4 teintes Dentin) et 3 translucidités ; disponibles en 14 teintes et 3 translucidités

Classe V

Si vous voulez...

restauration de petits défauts...

restauration de défauts importants...

restauration hautement esthétique de défauts importants...

Nos recommandations :

Tetric EvoFlow²

Tetric EvoCeram¹ (teintes Enamel)

Tetric EvoCeram¹ (teintes Dentin & Enamel)

¹ disponible en 22 teintes (18 teintes Enamel & 4 teintes Dentin) et 3 translucidités ; ² disponibles en 14 teintes et 3 translucidités

Dents lactéales : Classe V

Si vous voulez...

efficacité et esthétique naturelle...

efficacité et modelabilité*...

stratification conventionnelle...

Nos recommandations :

Tetric EvoFlow¹ Bulk Fill

Tetric EvoCeram¹ Bulk Fill

Tetric EvoCeram² (teintes Enamel uniquement)

* pour les cas d'agénésie dentaire (ex. hypodontie) ou luxation ; ¹ dans la teinte de base appropriée (avec dents lactéales très lumineuses : *W) ; ² disponible en 18 teintes Enamel

Technique mono-couche




Obturation avec un seul incrément de Tetric EvoCeram Bulk Fill.



Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Technique bi-couche

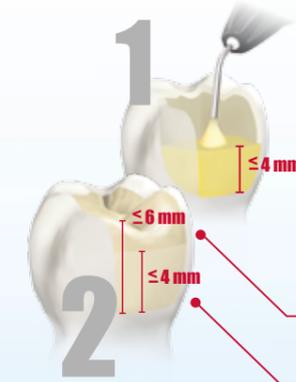

Sustitution dentinaire en fond de cavité avec Tetric EvoFlow Bulk Fill et recouvrement occlusal avec Tetric EvoCeram.



Tetric EvoCeram®



Tetric EvoFlow® Bulk Fill



Stratification du noyau dentinaire avec Tetric EvoCeram Dentin



Tetric EvoCeram®



Restauration des petits défauts de Classe V avec Tetric EvoFlow



Tetric EvoFlow®



Restauration des défauts volumineux de Classe V avec Tetric EvoCeram



Tetric EvoCeram®



Restauration en un seul temps sans recouvrement.



Tetric EvoFlow® Bulk Fill

Restaurations directes

Tetric Evo-Line fait partie de la gamme de produits pour "restaurations directes". Les produits de cette catégorie couvrent l'ensemble de la procédure de réalisation des restaurations directes, de la préparation à l'entretien des prothèses. Ces produits sont coordonnés les uns aux autres de manière optimale et permettent une mise en œuvre et une application réussies.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

Adhese® Universal

Adhésif universel



Adhésion universelle en conditionnement élaboré

- Conditionnement efficace – jusqu'à 190 applications unitaires par VivaPen de 2 ml
- Application universelle – pour toutes les techniques d'adhésion et de mordantage
- Résultats reproductibles – adhésion élevée sur dentine et émail

Bluephase® Style

Lampe à photopolymériser



Petite LED pour toutes les indications

- Tous les utilisateurs – une prise en main ergonomique adaptée pour tous
- Tous les matériaux – utilisation universelle grâce à la LED Polywave® à large spectre d'émission
- Tout le temps – raccordement filaire optionnel grâce à la fonction Click & Cure

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits de la gamme „Restaurations Directes“ ?

Contactez simplement votre interlocuteur Ivoclar Vivadent ou visitez notre site internet www.ivoclarvivadent.fr.

Dispositifs médicaux Classe IIA /CE 0123.
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.
Non remboursé(s) par les organismes de santé.

Les descriptions et les données fournies ne sont pas des garanties ni des engagements.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein.

B0217 - RCS Annecy B 326 420 544 - Sous réserve d'erreurs typographiques.
Visuels non contractuels. Imprimé en France

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent SAS

B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 4 50 88 64 00
Fax +33 4 50/68 91 52

www.ivoclarvivadent.fr

ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

La gamme Tetric Evo

2 System kits pour toutes les classes de cavités

La gamme de produits Tetric Evo associe fiabilité clinique et pérennité avec innovation. Les quatre composites de la famille Tetric Evo offrent des restaurations esthétiques de haute qualité pour toutes les classes de cavités. Une plus grande efficacité peut être obtenue en combinant les composites, en fonction de la classe de cavité.

Ces 4 composites sont désormais réunis dans de nouveaux System kits contenant un aperçu de leurs indications et des possibilités de combinaison, illustrées dans un mini-livret, afin de permettre aux utilisateurs de savoir quel matériau est le mieux adapté à chaque cas.

Chaque System kit comprend :

- Tetric EvoCeram - modelable, pour les techniques de stratification conventionnelle
- Tetric EvoFlow - fluide, pour les techniques de stratification conventionnelle
- Tetric EvoCeram Bulk Fill – modelable, application par couches d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm
- Tetric EvoFlow Bulk Fill – fluide, application par couches d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm
- Adhese® Universal VivaPen – système adhésif universel

Ces kits sont disponibles en versions **cavifils** ou **seringues**.



Contenu du System kit version seringues

- 1 seringue 3g Tetric EvoCeram A2
- 1 seringue 3g Tetric EvoCeram A3
- 1 seringue 3g Tetric EvoCeram Dentin A2
- 1 seringue 2g Tetric EvoFlow A3
- 1 seringue 3g Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA
- 1 seringue 2g Tetric EvoFlow Bulk Fill IVA
- 1 VivaPen 2ml Adhese Universal
- Accessoires divers.

Réf. 686707



Les kits contiennent un document reprenant les recommandations.

Contenu du System kit version cavifils

- 10 cavifils 0,2g Tetric EvoCeram A2
- 10 cavifils 0,2g Tetric EvoCeram A3
- 5 cavifils 0,2g Tetric EvoCeram Dentin A2
- 10 cavifils 0,2g Tetric EvoFlow A3
- 10 cavifils 0,2g Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA
- 10 cavifils 0,2g Tetric EvoFlow Bulk Fill IVA
- 1 VivaPen 2ml Adhese Universal
- Accessoires divers.

Réf. 686718



Classes I & II

Effacité en une étape

- jusqu'à 4 mm, dentine non dyschromiée ou légèrement dyschromiée



Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Classes III & IV

Stratification conventionnelle esthétique

- Classe IV et grandes cavités de classe III



Tetric EvoCeram®



Tetric EvoFlow® Bulk Fill

Tetric EvoCeram®

Effacité et choix de teintes

- 4-6 mm, dentine légèrement à moyennement dyschromiée



Tetric EvoFlow®

Tetric EvoCeram®

Adaptation du matériau au biseau

- Grands biseaux des cavités de classe IV

Classe V

Grandes cavités

- Grandes cavités de classe V



Tetric EvoCeram®

Petites cavités

- Petites cavités de classe V



Tetric EvoFlow®