

NOUVEAU

IPS Style[®]

La première céramo-métallique brevetée contenant des cristaux d'oxyapatite

MAKE IT YOUR!
STYLE YOUR!



ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

STYLE.

Coup d'œil sur la céramo-métallique

Les systèmes céramo-métalliques font partie du quotidien du laboratoire. Les résultats obtenus sont prévisibles. Leur fiabilité clinique est prouvée. Leur rôle dans la réussite du laboratoire est considérable. Les techniques céramo-métalliques sont à la pointe de la technologie.

Fort de ses quarante années d'expérience dans ce domaine, Ivoclar Vivadent poursuit ses efforts dans le développement des systèmes céramo-métalliques et explore de nouvelles possibilités : une céramo-métallique comme on n'en avait jamais vu jusqu'à présent.

Make it your Style.



IPS Style®: quoi de neuf ?


IPS Style® est le premier matériau céramo-métallique breveté contenant des cristaux d'oxyapatite. Ces cristaux, associés à des cristaux de leucite et de fluoroapatite et des phases vitreuses correspondantes, apportent à cette vitrocéramique basse fusion d'excellentes caractéristiques de mise en œuvre et des propriétés optiques remarquables.

Le système IPS Style est adapté au CDT des alliages courants. Il comprend des composants adaptés aux techniques de stratification conventionnelles mono et multicouche. IPS Style est facile et pratique à utiliser, mais pas seulement : il s'agit également d'un matériau hautement esthétique. Les composants de l'assortiment polyvalent IPS Ivocolor pour le maquillage et la caractérisation sont parfaitement adaptés à ce système.

Cristaux de céramiques dentaires :



Leucite cristalline
Expansion contrôlée
et résistance
Grossissement x 8 200

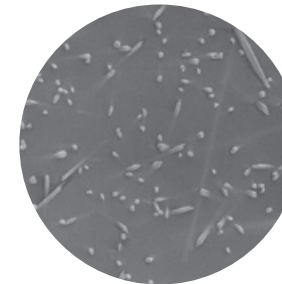

**Fluoroapatite en forme
de fines aiguilles**
Luminosité, vitalité et
dynamisme naturels
Grossissement x10 000



Oxyapatite en forme d'aiguilles
Contrôle ciblé de la translucidité et
de l'opacité
Grossissement x10 000

NOUVEAU

Que cela signifie-t-il ?

Make it fast. La rétraction moindre d'IPS Style vous fait gagner du temps.

Make it easy. La facilité d'utilisation du matériau garantit la fiabilité des résultats.

Make it natural. L'oxyapatite contrôle la translucidité et l'effet de profondeur.

Qu'est-ce qu'IPS Style a de spécial ?

Une composition sur-mesure.

IPS Style associe trois types de cristaux au sein de la même formule : leucite, fluorapatite et oxyapatite.

MAKE IT FAST.

IPS Style® est rapide...

Retrait optimisé

Le retrait optimisé d'IPS Style permet au prothésiste dentaire d'obtenir rapidement et efficacement le résultat attendu. Les formes de la restauration sont proches de la perfection dès la première cuisson.



Céramo-métallique conventionnelle



IPS Style®

Retrait de la céramique et mouillabilité de l'opaquer - comparaison : Dans des conditions d'essai normalisées*, IPS Style® montre visiblement de meilleurs résultats après cuisson, comparée aux céramo-métalliques conventionnelles.

* Source : R&D, Ivoclar Vivadent, Schaan, 2015

Grande stabilité à la cuisson

Les détails du modelage et la morphologie de la restauration sont fidèlement restitués après la cuisson. Les cuissons multiples ne sont pas forcément nécessaires, ce qui fait gagner un temps précieux.



” IPS Style est un matériau très esthétique, avec une luminosité exceptionnelle. J'apprécie ses bonnes propriétés de modelage et son faible retrait. Le produit est facile à utiliser, les restaurations se fabriquent sans stress. C'est un avantage énorme !

”



Gérald Ubassy,
prothésiste dentaire
Laboratoire dentaire et Centre de
Formation International, France

... extrêmement rapide

Stratifier avec un seul matériau

Les masses de stratification IPS Style pour la technique traditionnelle multicouche simplifient considérablement les procédures. La céramique monocouche IPS Style Ceram One améliore encore l'efficacité au laboratoire. Elle facilite la réalisation des restaurations céramo-métalliques anatomiques esthétiques.

Le système IPS Style Ceram One comprend des masses dentines et incisales parfaitement adaptées à la reproduction fidèle de la teinte et de la translucidité.

Chaque minute compte

L'opaker en poudre IPS Style Ceram Powder Opaquer 870 présente la même architecture chimique que les masses de stratification IPS Style.

La teneur élevée en cristaux d'oxyapatite donne à l'opaker d'excellentes propriétés de masquage, même en couches minces, qu'il soit appliqué de manière conventionnelle ou par pulvérisation – pour un effet lumineux qui part du cœur de la restauration.



Milos Miladinov,
Prothésiste dentaire, Roumanie



Christoph Andres,
prothésiste dentaire
Zahntechnik Andres,
Suisse

” J'adore la vitalité et le dynamisme de cette céramique. IPS Style se caractérise par une combinaison performante entre l'opaker, qui crée un effet de profondeur, et les nombreuses masses de stratification, qui ajoutent une nouvelle dimension à l'esthétique dentaire ”

MAKE IT EASY.

IPS Style® est simple à utiliser...

Excellente tenue des masses, manipulation intuitive

IPS Style s'utilise de la même manière que les céramo-métalliques classiques.

Elle présente néanmoins un avantage majeur : IPS Style est dotée d'une stabilité exceptionnelle et d'excellentes propriétés de modelage. Les masses de stratification se maintiennent exactement là où elles ont été placées.


IPS Style avantage la manière de travailler des débutants comme des utilisateurs expérimentés - pour des résultats exceptionnels.



... et facilite la vie

Adaptée à toutes les armatures

IPS Style est adaptée à tous les types d'armatures dans la gamme des CDT indiqués, quel que soit le système utilisé pour les produire : alliage précieux ou non précieux, numérique ou analogique, coulée ou usinage. Sur les alliages non précieux, par exemple Zenotec® NP* ou Colado® CC, IPS Style peut même être utilisée sans bonding céramique - pour des fonctionnalités illimitées en quelques étapes de travail.

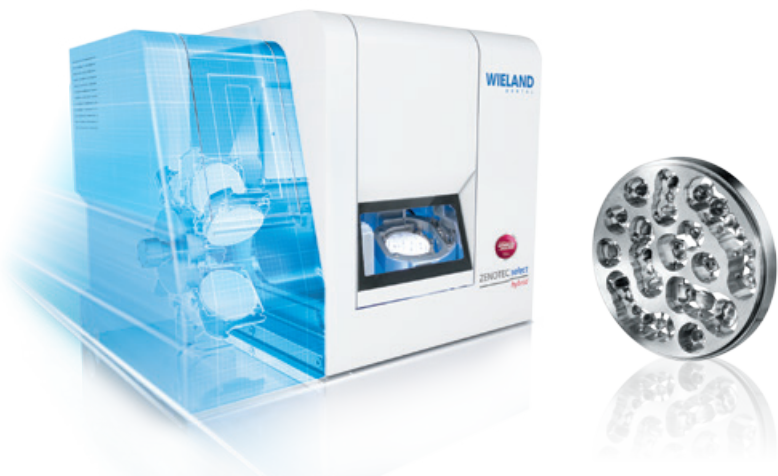

Les disques Zenotec® NP*, par exemple, peuvent être usinés avec l'unité d'usinage Zenotec select* et être ensuite stratifiés avec IPS Style®.

*Fabricant : Wieland Dental, Allemagne

Un système de teintes coordonnées

La céramo-métallique IPS Style et le système tout-céramique IPS e.max® obéissent à un schéma de teintes commun. Par conséquent, les cas cliniques complexes peuvent être résolus en utilisant différents matériaux - pour un aspect global harmonieux.



B. Votteler, prothésiste dentaire ;
Dr F. Sharghi, Allemagne



”

J'aime modeler les matériaux céramiques lorsqu'ils sont légèrement humides. IPS Style peut être appliquée très précisément, même assez liquide, et restera exactement là où elle a été placée. Je n'avais jamais vu un matériau céramique se comporter de cette manière

”



Benjamin Votteler,
prothésiste dentaire
Allemagne

MAKE IT NATURAL.

IPS Style® est esthétique...

Un jeu infini de couleurs

Tous les composants teintés IPS Style, de l'opaker aux masses incisales, contiennent des cristaux d'oxyapatite. La luminosité élevée d'IPS Style produit des résultats naturels en bouche. Quel que soit le nombre de cuissons nécessaires pour terminer la restauration, les résultats montrent une excellente stabilité de teinte. La large gamme de matériaux répond à une myriade d'exigences individuelles.




H. & D. Crescenzo ; Dr M. Becker, France



... et offre un bel effet de profondeur

NOUVEAU

L'effet des cristaux d'oxyapatite

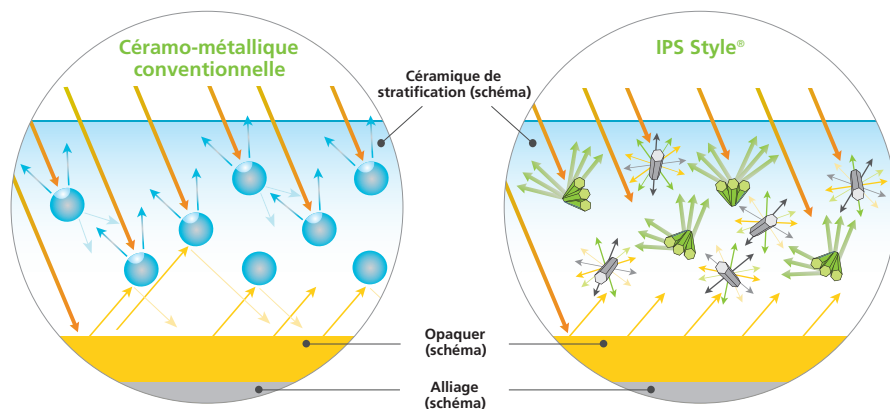

Opacité classique générée par une forte teneur en pigments opaques : la lumière incidente est partiellement absorbée par le matériau de stratification. Le matériau a un aspect terne. L'opaque n'offre pas d'effet de profondeur.

Opacité produite par les cristaux en forme d'aiguilles : la lumière incidente est diffusée et réfléchi de manière diffuse. La grande capacité de réflexion des cristaux détermine l'esthétique de la restauration et intègre la couleur de l'opaque dans le jeu de lumière et de couleur de la restauration.

Matériau d'une luminosité exceptionnelle

Grâce à la diffusion de la lumière et à la réflexion diffuse, les fins cristaux de fluoroapatite en forme d'aiguilles améliorent la luminosité du matériau. Les cristaux d'oxyapatite ont une grande capacité à réfléchir la lumière, ce qui contribue à créer un effet de profondeur. La teneur en cristaux d'oxyapatite varie selon les matériaux - de l'opaque aux masses incisales - pour l'adaptation sélective de la translucidité.



” Dès le début, nous avons apprécié de travailler avec IPS Style. Les restaurations sont lumineuses et ont un aspect incroyablement naturel. Pour nous IPS Style est l'équivalent céramo-métallique du tout-céramique IPS e.max. Il y a beaucoup à découvrir avec IPS Style – comme IPS e.max, la céramique est adaptée à de nombreuses techniques différentes.

”



Hélène & Didier Crescenzo,
Laboratoire Esthetic Oral,
France

MAKE IT UNIQUE.

IPS Style® est parfaite pour les laboratoires...

NOUVEAU

IPS Ivocolor

Le système de maquillage et de glaçage polyvalent IPS Ivocolor est un composant du système céramique IPS Style. Il est indiqué pour la caractérisation des restaurations. IPS Ivocolor est adapté à toutes* les céramiques de pressée, CAD et de stratification Ivoclar Vivadent, y compris IPS e.max® (tout-céramique). Un système de teintes pour de nombreuses céramiques.



Digital Shade Assistant (DSA)

Une conception exclusive alliée à une technologie intelligente : la fonction de détermination de teinte DSA du four à céramique haute technologie Programat® P710 permet de déterminer numériquement la teinte de la dent du patient. Le logiciel compare les piges des teintes sélectionnées avec la couleur de la dent naturelle.



*ne s'applique pas aux restaurations non cristallisées IPS e.max® CAD et CAD-on

... et fait entrer la perfection dans les cabinets dentaires

Solidarisation adaptée

Les restaurations stratifiées avec IPS Style peuvent être solidarisées avec le composite de collage polyvalent Multilink Automix, le composite de collage auto-adhésif SpeedCEM® ou le ciment verre ionomère Vivaglass® CEM.

Le composite de collage esthétique Variolink® Esthetic, conçu pour l'assemblage des restaurations en céramique d'un haut degré d'exigence, est recommandé pour le collage des facettes IPS Style.



Entretien et protection

Les restaurations réalisées avec IPS Style nécessitent le même type de nettoyage professionnel et de soins durables que la gencive et les muqueuses buccales. Le vernis protecteur Cervitec® Plus contient de la chlorhexidine et du thymol, composants antimicrobiens. Ceux-ci protègent les surfaces dentaires en réduisant l'activité bactérienne en bouche.





Prothèse fixée

IPS Style® fait partie des produits de la catégorie prothèses fixées. Les produits de cette catégorie couvrent l'ensemble de la procédure de réalisation des prothèses fixées, des provisoires à l'entretien des prothèses. Ces produits sont coordonnés les uns aux autres de manière optimale et permettent une mise en œuvre et une application réussies.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

Alliages

Un choix unique d'alliages



Performance, qualité, confiance

- Large gamme d'alliages adaptés aux exigences de la dentisterie moderne
- Parfaitement indiqués pour les matériaux de stratification céramique et composite
- Plus de 100 ans d'expérience dans le domaine des alliages dentaires

IPS Ivocolor

Maquillants et glasures universels



One for all

- Polyvalent - compatible avec toutes les céramiques* et Zenostar (oxyde de zirconium)
- Flexible - pour le maquillage, le glaçage et le mélange avec des matériaux céramiques
- Esthétique - couleurs naturelles

* à l'exception des restaurations non cristallisées IPS e.max CAD et CAD-on

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits de la gamme „Prothèse Fixée“ ?

Contactez simplement votre interlocuteur Ivoclar Vivadent ou visitez notre site internet www.ivoclarvivadent.fr.

Ivoclar Vivadent AG
 Benderstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 235 35 35
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent SAS
 B.P. 118
 74410 Saint-Jorioz
 France
 Tel. +33 450 88 64 00
 Fax +33 450 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Dispositif médical Classe IIA /CE 0123.
 Lire attentivement les instructions figurant dans
 la notice et/ou sur l'étiquetage. Non remboursé(s)
 par les organismes de santé.
 B0816 - RCS Annecy B 326 420 544

ivoclar
vivadent®
 passion vision innovation